



Patiententransportliege »DX1« /3-tlg. | mit Beinteil, hydraulisch höhenverstellbar, Modell 1095

Die Patiententransportliege "Modell 1095" aus der DX1-Serie bietet einen hohen Komfort für Patienten und Anwender. Durch die einfache Verstellung der Segmente, Höhe, Seitengittern und verbesserten Mobilität, ist eine simple Anpassung an die Bedürfnisse des Patienten möglich, welche ebenso die Arbeit des Pflegepersonals enorm erleichtert. Die Transportliege DX1 - 1095 ist perfekt für den Einsatz in

Krankenhäusern, Pflegeheimen und Kliniken.

Preis: 3.550,00 €

Regulärer Preis: 3.787,00 € zzgl. MwSt.

Höhenverstellbare Transport- und Aufwachliege »DX1« /3-tlg. mit Beinteil, Modell 1095

Die Patiententransportliege 1095 aus der DX1-Serie von Dewert bietet nicht nur höchsten Komfort und Stabilität für den Transport von Patienten, sondern auch einen klaren Nutzen für das Pflegepersonal. Die einfache Höhenverstellung, die leichte Fahrbarkeit und das stufenlos verstellbare Kopf-, Beinteil oder Fußteil ermöglichen eine einfache Anpassung an die Bedürfnisse des Patienten und erleichtern so die Arbeit der Plegekraft.

Mit einer Belastbarkeit von 225 kg, absenkbaaren Seitengittern und Wandabweisern ist die Liege nicht nur robust, sondern auch sicher. Die zentralen Doppellaufrollen und der Schiebegriff ermöglichen zudem eine einfache Mobilität, was den Transport von Patienten erleichtert und Zeit spart. Mit der Modell 1050 sind Sie in der Pflege bestens ausgestattet und können sich auf eine effiziente und sichere Arbeit verlassen.

Die Vollausrstattung beinhaltet:

- bis unter das Polster absenkbaaren Seitengitter,
- verbesserte Mobilität, zentral feststellbaren Doppellaufrollen inklusive Richtungsfeststellung,
- vier Wandabweiser,
- silber beschichteten Schiebgriffe am Kopfteil und Fußteil,
- die starke Hydraulikpumpe mit 10.000 N
- ein sehr stabilen Single-Frame-Scherensystem Gestell,
- hochwertige und bequeme 70 mm Polsterung mit 2-lagigem, sortenreinem Polyurethan-Schaumstoff mittelweich durch hochwertige Kaltschaumauflage

Innovation mit hoher Schmutzresistenz und Reinigungsfreundlichkeit: Polster Unterseite mit thermoplastischer PVC Folie bezogen. Polsterbezüge jetzt aus Skai Toronto EN Kunstleder mit revolutionärer Technologie und sehr langer Lebensdauer. Diese können mit vielen Desinfektionsmitteln oder alkoholbasierten Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) desinfiziert werden. Mit geeigneten Reinigungsmitteln lassen sich viele Verschmutzungen rückstandslos entfernen.

Die zweiteilige Variante von 195 cm ist aufgeteilt in ein vereintes Kopf-Rückenteil ca. 750 cm und eine Liegefläche von 120 cm. Das Kopf-Rückenteil ist stufenlos von 0° bis +75° in Sitzposition verstellbar.

Diese DX1 ist ein erstklassiges Produkt »Hergestellt in Deutschland« nach Richtlinien (EU)2017/745 (MDR) und **belastbar** bis **225 kg** (entsprechend IEC 60601 mit 4-facher statischer Last von 900 kg geprüft).



Das Produkt Patiententransportliege »DX1« /3-tlg. | mit Beinteil, hydraulisch höhenverstellbar, Modell 1095

Produktinformation:

- Tritthebel beidseitig der Liegefläche
- verbesserte Mobilität, Leichtlaufenden Ø 100 mm Doppellaufrollen (zentral feststellbar), inklusive Richtungsfeststellung
- Starke Hydraulikpumpe mit 10.000 N mit großer Übersetzung (dadurch leichte Betätigung auch bei höheren Gewichten)
- Ein paar absenkbares Seitengitter (Seitensicherungen) bis unterhalb des Polsterniveaus
- Vier Wandabweiser Ø 200 mm
- Schiebgriffe an Kopf- und Fußteil (silber pulverbeschichtet)
- Hochwertige und bequeme 7 cm Polsterung mit 2-lagigem, sortenreinem Polyurethan-Schaumstoff mit hohem Raumgewicht (RG42 und RG75) und idealer Liegenhärte.
- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +65° verstellbar, Kopfteillänge: 550 mm
- Mittelteil fest, Mittelteillänge: 480 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +50° verstellbar, Fußteillänge: 920 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz
- Polster mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen
- Hygiene-Ausstattung:
 - Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
 - Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
 - Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
 - Einfache Hygiene durch offene Bauweise
- Verschleißfestes Führungssystem am Unter- und Obergestell durch Einsatz von Wälzlagerrollen
- Hohe Stabilität durch massive 20 mm Achsen mit mehrfacher Igus-Polymergleitlager. Somit keine Schmierung Wartungsarbeiten notwendig.
- Eigengewicht der Liege: ca. 100 Kg
- Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Liegengestell mit stabilem Single-Frame-Scherensystem
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm
- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
- Belastbarkeit: 225 kg (entsprechend IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft), Kopfteil belastbar bis 90 kg
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung

Abmessung:

- Hydraulisch höhenverstellbar von 520 mm bis 970 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm, Gesamtlänge: 2.060 mm
- Breite der Liegefläche: 700 mm, Gesamtbreite: 780mm

- Opiotnale Breite der Liegefläche: 800 mm

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 195
- Breite [cm]: 70, 80, Sondermaß möglich
- Höhe [cm]: 52-97
- Polsterstärken [mm]: 70, 80

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Therapie & Reha, Pflege, Ruheraum & Erste-Hilfe-Raum
- Belastbarkeit [kg]: 225, nach IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Extra hoch (≥ 85 cm), Adipositas, Schwerlast (≥ 225 kg), Elektrisch ableitfähig, Zubehör (Gitter, Halter, etc.), Sonderanfertigung möglich
- Besonderheiten: verbesserte Mobilität, bis unter das Polster absenkbares Seitengitter, Hydraulikpumpe mit 10.000 N, hochwertige, bequeme mittelweiche Kaltschaumauflage
- Herstellerportrait: [K.H. Dewert](#)
- Hersteller: Dewert
- Serie: DX1
- Modell: 1095
- Versandart: Spedition

Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Laufrollen zentral verstellbar
- Höhenverstellung: Hydraulisch (Pumphebel)
- Gestellform: Scherengestell (Lotrecht)
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Kopf-Rückenteil (vereint), Liegefläche, Sitzteil bzw. Mittelteil, Fußteil, Bein-Fußteil (vereint)
- Polsterbasis: Multiplex-, Schichtholz-, Sperrholz-, Siebdruckplatte
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position, Relaxposition, Beach-Chair, Herzbett, Stufen
- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel: 0° bis $+65^\circ$
- Rückenteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Rückenteilverstellwinkel: 0° bis $+50^\circ$
- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Beinteilverstellwinkel: 0° bis $+50^\circ$
- Fußteilverstellart: keine
- Schaumstoff: PUR $\geq$ RG 50 - (>50 kg/cbm), Kaltschaum $\leq$ RG 40 - (40 kg/cbm)

- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichteht, abriebfest, reißfest, ledertypisch, elastisch, angenehm weich, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, sehr leicht zu reinigen, vegan, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch, antistatisch, ableitfähig
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 300.000 Zyklen

Polsterbezüge und Polsterfarben:


NEU: skai® Toronto EN mit staynu Technologie

Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.

Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreiben, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichteht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300.000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm



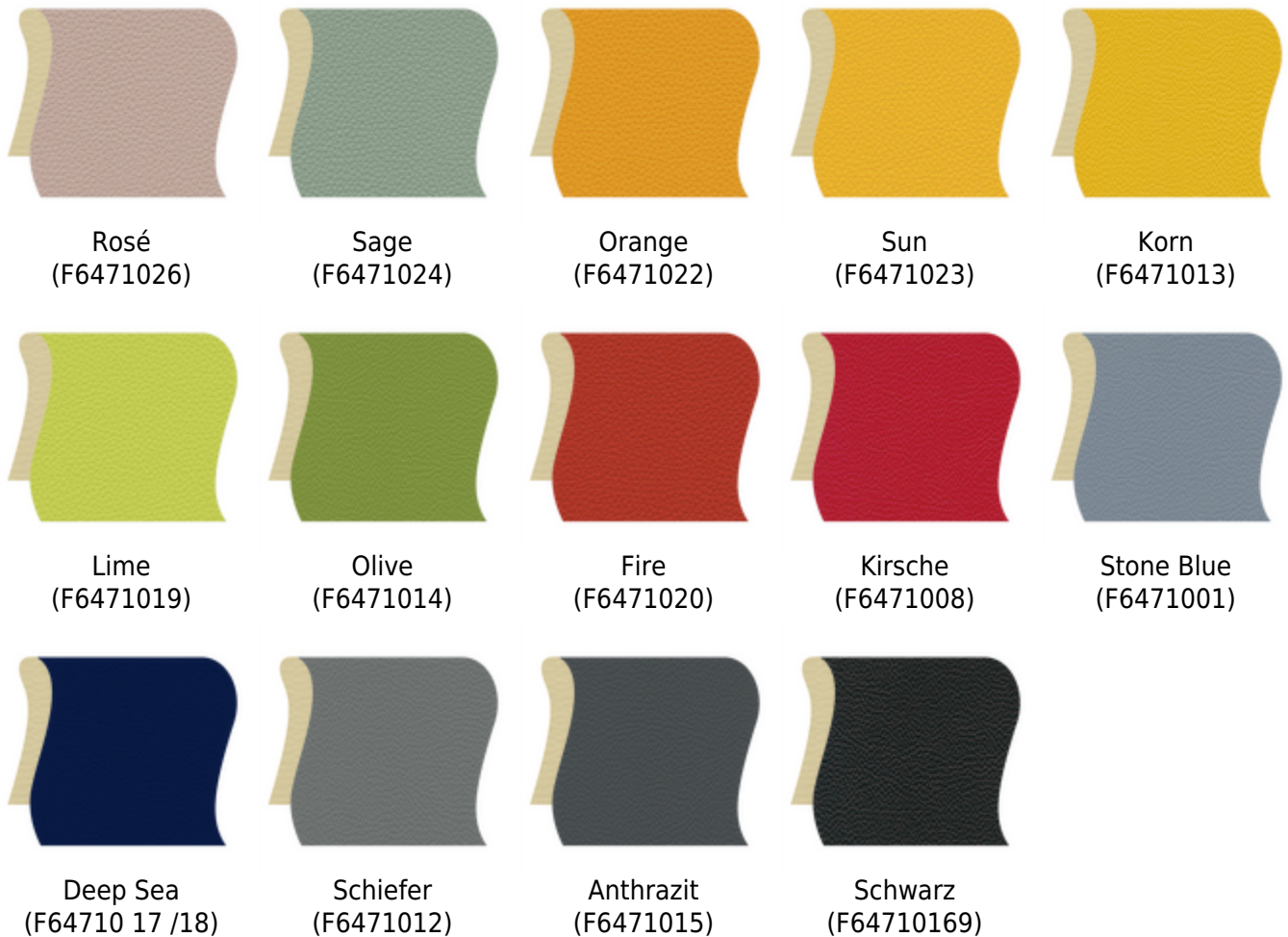

Kunstleder PANDORIA PLUS (Dezente Optik mit feiner Mikroporenstruktur)

Antibakteriell nach JIS Z 2801, antimikrobiell, besonders desinfektionsmittelbeständig, besonders schweiß-, urin- und blutbeständig, schwer entflammbar, besonders abriebfest, lichtecht, reiß- und weiterreißfest, langlebig, pflegeleicht und besonders öl- und fettbeständig. MPG DIN ISO 10993-5+10
Eigenschaften: Gewicht: 800 +/- 50g/qm, Dicke 1,35 +/- 0,2 mm, **Abrieb > 300.000.**

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)





skai® Mano-S Kunstleder

Hochwertig, widerstandsfähig und chic. Die elegante Kalbsledernarbung macht auch im medizinischen Bereich eine gute Figur. Die Oberfläche ist elektrisch leitfähig und ist für alle Bereiche bestens geeignet, in denen die elektrostatische Aufladung vermieden werden muss. Dieses spezielle Bezugsmaterial skai-Mano-S gibt es ausschließlich in schwarz.

Eigenschaften:

Material: ca. 90 % PVC-Compound, ca. 10 % BW/PES-Gestrick Gewicht: 650 +/- 50 g/m2 Materialstärke: 1,1 +/- 0,2 mm, elektrisch leitfähig, langlebig, reißfest, lichtecht, vegan und desinfektionsmittelbeständig

Pflegehinweise:

Bitte unbedingt beachten! Mit wenig klarem Wasser oder einer PH-neutralen Seifenlösung und einer weichen Bürste oder einem Microfasertuch reinigen und anschließend mit einem weichen Tuch trocknen.

Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte bitte umgehend entfernen.

Ungeeignet sind unverdünnter Alkohol, unverdünntes Aceton, alle Lösungs- und Reinigungsmittel, Scheuermittel, Perchlorethylen, alle Arten von Wachs und Trichlorethylen. Diese Produkte können die Beschichtung der Bezüge beschädigen und rissig machen.



Schwarz Leitifähig
(F6461486)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de