



Praxisliege mit langem Kopfteil | Serie DFH Modell 20

Hochwertige zweiteilige Praxisliege »Made in Germany« mit **langem 75 cm und pos. 75° verstellbarem Kopfteil**, hergestellt nach MDR Richtlinien mit 60 mm Qualitätspolster und belastbar bis 250 kg. Durch das schlichte Design und die leichte Reinigung ist die Praxisliege Modell 20 die perfekte Wahl für jede medizinische Einrichtung.

Preis: 755,00 €

Regulärer Preis: 809,00 € zzgl. MwSt.

Praxisliege /2-tlg. mit langem Kopfteil +75° | Modell 20

Unsere hochwertige zweiteilige Praxisliege Modell 20 von Dewert ist die perfekte Wahl für Ihre Praxis oder Klinik. Das lange verstellbare Kopfteil bietet Ihrem Patienten eine angenehme Sitzmöglichkeit während der Untersuchung oder Behandlung.

Das Modell 20 ist eine Investition in die Zukunft Ihrer medizinischen Einrichtung. Dank ihrer langlebigen Bauweise und des innovativen Polsterbezugs wird sie auch nach Jahren noch wie neu aussehen. Das macht sie zu einer wertvollen Anschaffung, die Ihnen langfristig viel Freude bereiten wird. Wir legen großen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit bei unseren Produkten, um Ihnen eine zuverlässige und langlebige Lösung für Ihre medizinische Einrichtung bieten zu können.

Diese hochwertige zweiteilige Praxisliege zeichnet sich durch Ihr langes bis +75° verstellbares Kopfteil sowie durch die qualitativ sehr gute Verarbeitung und die hohe Anwendersicherheit aus. Das sehr strapazierfähige Qualitätspolster hat eine Stärke von 6-8 cm. Die zweiteilige Liegefläche ist aufgeteilt in ein Kopfteil (75 cm) und eine Liegefläche (120 cm).

Diese Liege ist ein hochwertiges Qualitätsprodukt "Made in Germany" hergestellt nach MDR Richtlinien und belastbar bis 250 kg.



Das Produkt Praxisliege mit langem Kopfteil | Serie DFH Modell 20

Produktinformation:

Grundausrüstung:

- Liegefläche 2-teilig
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Kopfteil stufenlos zu Sitzposition verstellbar
- Ansteckmöglichkeit für Papierrollenhalter an Kopf- und Fußseite
- Hygiene-Ausrüstung
- Flächige Belastbarkeit: 250 kg (entsprechend IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft)

Gestell:

- Liegengestell aus Vierkantröhr 30 x 30 x 2 mm
- Mit Querstreben zwischen den Liegenfüßen
- Feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten, Fahrbarkeit optional
- Fahrbarkeiten als Option wählbar, dann zusätzliche Längsverstrebung erforderlich
- Verzinkte Stahlscharniere als Verbindungselemente zwischen den Polstersegmenten
- Liegenfußpaare und Gestellrahmen fest verschraubt

Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 2-teilig:
- Kopfteil stufenlos per Gasdruckfeder von 0° bis +75° verstellbar (Sitzposition)
- Kopfteillänge: 75 cm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 120 cm

Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 6 cm, optional 7 oder 8 cm (elastisches Komfortpolster mit offenporigem Kaltschaum, daher besonders gut geeignet für längere Patientenliegezeiten)
- Trägerplatte bestehend aus 18mm-Spannplatte mit umlaufendem Massivholz-Verstärkungsrahmen 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff mit RG 46 und RG 75 (kein Verbundschaum)
- Dewert-Hygiene-Ausrüstung:
 - Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
 - Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
 - Einfache Hygiene durch offene Bauweise
 - Optional: Polsterbezugsmaterial Skai Toronto EN mit staynu

Die Fertigung in weiteren Abmessungen und mit Sonderzubehör ist auf Anfrage möglich!

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 195, Sondermaß möglich
- Breite [cm]: 65, Sondermaß möglich
- Höhe [cm]: 68, Sondermaß möglich
- Polsterstärken [mm]: 60, 70, 80

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Therapie & Reha, Ruheraum & Erste-Hilfe-Raum, Kosmetik & Wellness
- Belastbarkeit [kg]: 250, nach IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Gestell verchromt, Zubehör (Gitter, Halter, etc.), Sonderanfertigung möglich
- Besonderheiten: Massivholz-Verstärkungsrahmen, Hygiene-Ausstattung, vielseitig und individuell konfigurierbar, optional fahrbar mit Seitengitter oder mit Anbau-Elementen
- Herstellerportrait: [K.H. Dewert](#)
- Hersteller: Dewert
- Serie: DFH
- Modell: 20
- Versandart: Spedition

Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Laufrollen einzeln verstellbar, Laufrollen zentral verstellbar
- Höhenverstellung: Keine
- Gestellform: 4-Bein Vierkantgestell
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

Polster

- Polster Segmente: Kopf-Rückenteil (vereint), Liegefläche
- Polsterbasis: Multiplex-, Schichtholz-, Sperrholz-, Siebdruckplatte
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position, Relaxposition, Beach-Chair, Herzbett
- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel: 0° bis +75°
- Rückenteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Rückenteilverstellwinkel: 0° bis +75°
- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: keine, per Gasdruckfeder
- Fußteilverstellart: keine
- Schaumstoff: PUR ≥ RG 50 - (>50 kg/cbm), Kaltschaum ≥ RG 50 - (>50 kg/cbm)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichtecht, abriebfest, reißfest, ledertypisch, elastisch, angenehm weich, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, sehr leicht zu reinigen, vegan, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch, antistatisch, ableitfähig
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 300.000 Zyklen

Polsterbezüge und Polsterfarben:


NEU: skai® Toronto EN mit staynu Technologie

Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.

Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreibern, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichtecht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300 000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm



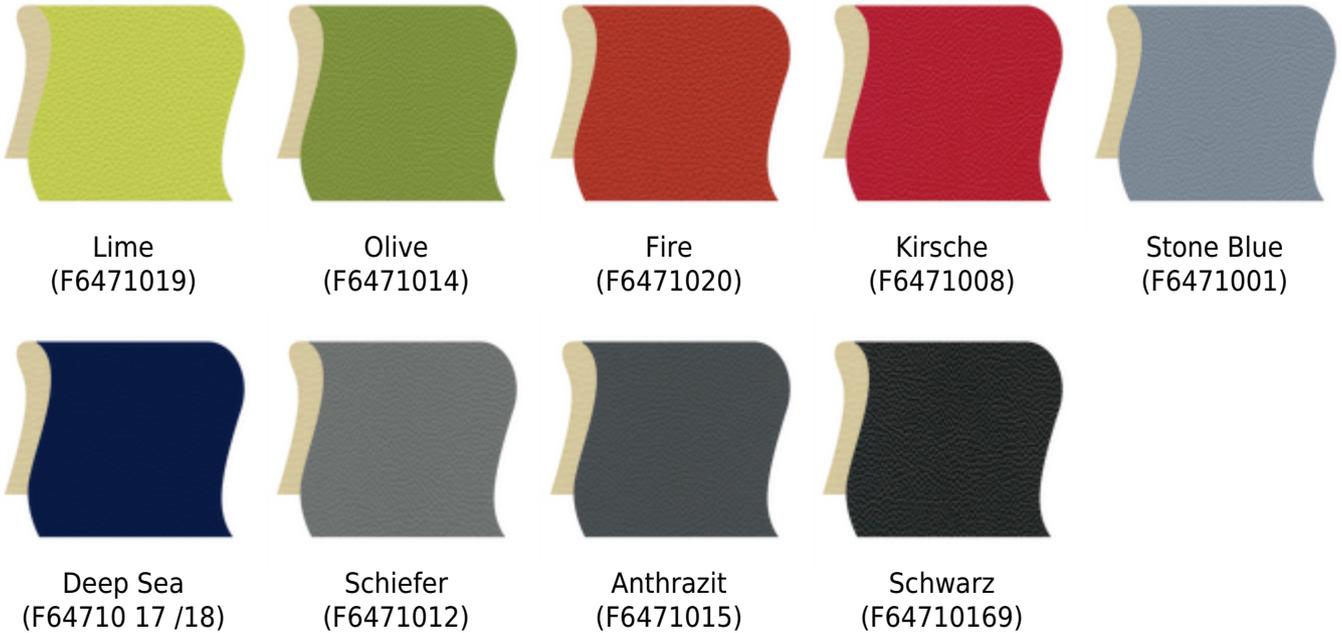

Kunstleder PANDORIA PLUS (Dezente Optik mit feiner Mikroporenstruktur)

Antibakteriell nach JIS Z 2801, antimikrobiell, besonders desinfektionsmittelbeständig, besonders schweiß-, urin- und blutbeständig, schwer entflammbar, besonders abriebfest, lichtecht, reiß- und weiterreißfest, langlebig, pflegeleicht und besonders öl- und fettbeständig. MPG DIN ISO 10993-5+10
Eigenschaften: Gewicht: 800 +/- 50g/qm, Dicke 1,35 +/- 0,2 mm, **Abrieb > 300.000.**

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)





skai® Mano-S Kunstleder

Hochwertig, widerstandsfähig und chic. Die elegante Kalbsledernarbung macht auch im medizinischen Bereich eine gute Figur. Die Oberfläche ist elektrisch leitfähig und ist für alle Bereiche bestens geeignet, in denen die elektrostatische Aufladung vermieden werden muss. Dieses spezielle Bezugsmaterial skai-Mano-S gibt es ausschließlich in schwarz.

Eigenschaften:

Material: ca. 90 % PVC-Compound, ca. 10 % BW/PES-Gestrick Gewicht: 650 +/- 50 g/m² Materialstärke: 1,1 +/- 0,2 mm, elektrisch leitfähig, langlebig, reißfest, lichtecht, vegan und desinfektionsmittelbeständig

Pflegehinweise:

Bitte unbedingt beachten! Mit wenig klarem Wasser oder einer PH-neutralen Seifenlösung und einer weichen Bürste oder einem Microfasertuch reinigen und anschließend mit einem weichen Tuch trocknen. Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte bitte umgehend entfernen.

Ungeeignet sind unverdünnter Alkohol, unverdünntes Aceton, alle Lösungs- und Reinigungsmittel, Scheuermittel, Perchlorethylen, alle Arten von Wachs und Trichlorethylen. Diese Produkte können die Beschichtung der Bezüge beschädigen und rissig machen.



Schwarz Leitfähig
(F6461486)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de