



Novak M Therapieliege »S3 - basic« | elektrische Höhenverstellung, 3-tlg. Kopfteil, Dachstellung

Die Liege ist mit hochwertigem Kunstleder bezogen und nahtlos, was die Reinigung erleichtert. Das Kopfteil verfügt standardmäßig über einen Nasenschlitz, um Ihren Patienten in Bauchlage maximalen Komfort zu bieten.

Preis: 3.369,00 €

Therapieliege Novak M »S3 Basic« - Die professionelle Wahl für alle Therapieformen

Einfache Positionierung

Die Therapieliege »S3 basic« bietet eine große Flexibilität bei der Positionierung, da alle drei Teile der Liege verstellt werden können. Die Liege ermöglicht auch die Dachstellung und Schrägstellung zur Unterstützung jeder physiotherapeutischen Behandlung.

Nasenschlitz und Einsatz

Die Therapieliege verfügt über einen Nasenschlitz im 3-tlg. Kopfteil. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass sich Ihre Patienten auch bei Behandlungen in Bauchlage wohl fühlen. Ein passender Einsatz gehört zur Standardausstattung, damit Sie den Nasenschlitz bei Bedarf verschließen können. Die Therapieliege S3 basic ist mit einem dreiteiligen Kopfteil ausgestattet, das den Nacken und den Schultergürtel Ihres Kunden während der Behandlung zusätzlich entspannt.

Einfach zu bedienender Fußschalter


Mit der elektrischen Therapieliege S3 basic können Sie die Höhe für jeden einzelnen Kunden schnell und reibungslos einstellen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kunden sich leicht auf der Liege niederlassen können und dass Sie die Liege in eine individuelle Position bringen können, um Gesundheitsrisiken zu verringern. Die Liege verfügt über einen Fußschalter, damit das Einstellen bei der Behandlung nicht stört, wenn Ihre Hände mit Öl eingerieben sind.

Perfekte Stabilität

Die stabile Konstruktion und eine Tragfähigkeit von 200 kg verleihen der Behandlungsliege eine perfekte Stabilität. Die Therapeuten können sich darauf verlassen, dass sich die Therapieliege nicht verbiegt, und dass sie auch dann fest steht, wenn stärkerer Druck ausgeübt wird. Die Therapieliege verfügt über ein einziehbares Rollensystem, sodass Sie die elektrisch höhenverstellbare Therapieliege bei Bedarf problemlos durch den Raum bewegen können. Die Rollen werden einfach durch Drücken eines Hebels mit dem Fuß aktiviert.

Einfache Reinigung

Die Polsterung ist mit hochwertigem Kunstleder bezogen. Es stammt von den besten europäischen Herstellern und ist wasserabweisend und feuerfest. Es ist entlang der gesamten Liegefläche nahtlos, wodurch die Reinigung erleichtert wird. Wir empfehlen, den Bezugsstoff mit einem Laken oder mit Papier von einem Papierrollenhalter zu schützen. Zusammen mit einer regelmäßigen Reinigung von Massageöl- und Lotionrückständen kann dies Ihnen dabei helfen, die Lebensdauer der Liege zu verlängern. Die wichtigen Teile der Liege sind durch eine stabile ABS-Kunststoffabdeckung geschützt. Ihre Oberfläche ist völlig glatt, daher reicht es aus, sie nur mit einem feuchten Tuch abzuwischen.

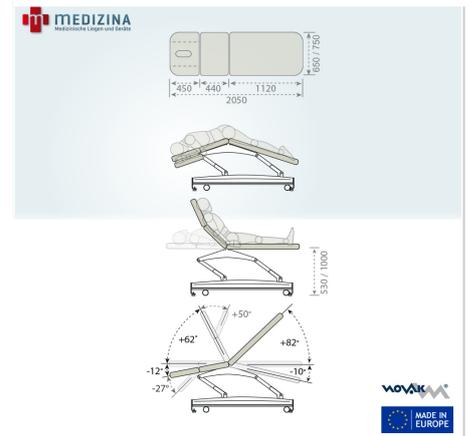

Das Produkt Novak M Therapieliege »S3 - basic« | elektrische Höhenverstellung, 3-tlg. Kopfteil, Dachstellung

Technische Daten:

- Kopfteil: 45 cm, Rückenteil: 44 cm, Fussteil: 1120 cm
- manuell verstellbarer Kopf-, Rücken- und Fußteil
- Nasenschlitz mit Einsatz
- einziehbare Rollen (Ø 75 mm)
- zulässige Belastung 200 kg, nach EN 60601-1:2006 geprüft
- Maximalgewicht des Patienten: 180 kg

Elektrische Leistung (Motor):

- Leistung: 100-240 V, 50-60 Hz, I: Max 4,0 A
- Arbeitszyklen: 10 % (max. 2 min/18 min Dauerbetrieb)
- Schutz gegen Eindringen von Flüssigkeiten: IPX6
- Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: Allgemeine Festlegungen: entspricht EN 60601-1:2006 (Klasse I)
- Gebrauchstauglichkeit: entspricht EN 60601-1-6:2010
- EMC: entspricht EN 60601-1-2:2015

Konformität:

- EN 1041:2008+A1:2013
- EN ISO 9001:2015
- EN ISO 13485:2016
- EN ISO 14971:2019
- EN ISO 15223-1:2017
- EN 62366:2008 + A1:2015
- EN 60601-1:2006
- EN 60601-1-2:2015
- EN 60601-1-6:2010
- Reduction of Hazardous Substances (RoHS)(EU Direktive 2011/65/EU)

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 205
- Breite [cm]: 65, 75
- Höhe [cm]: 53 - 100
- Polsterstärken [mm]: 80

Allgemein

- Einsatzbereich: Therapie & Reha
- Belastbarkeit [kg]: 200

- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Extra hoch (≥ 85 cm), Extra lang (≥ 200 cm), Kopftieflage
- Herstellerportrait: [NOVAK M d.o.o](#)
- Hersteller: Novak M
- Serie: Massageliege S3 - basic
- Modell: TTS3-B
- Versandart: Spedition

Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Rad Hebesystem
- Höhenverstellung: Elektrisch
- Gestellform: Kippwinkel (Parallelogramm)

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil & Rückenteil (separat), Armablagen, Liegefläche, Sitzteil bzw. Mittelteil, Bein-Fußteil (vereint)
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position, Relaxposition, Beach-Chair, Herzbett, Trendelenburg, Dachstellung
- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel: -27° bis $+50^\circ$
- Rückenteilverstellart: manuell (Raster, Klemmstange, o.Ä.)
- Rückenteilverstellwinkel: -10° bis $+82^\circ$
- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: manuell (Raster, Klemmstange)
- Fußteilverstellart: keine
- Polsterbezug Eigenschaften: flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichtecht, reißfest, urinbeständig, schweißbeständig
- Polsterbezug-Farbauswahl: Bis 30 Farben, keine Sonderfarben
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 100.000 Zyklen


Polsterbezüge und Polsterfarben:


ATN Master Plus

Das Kunstleder ist UV-beständig, schweißbeständig, reißfest, salzwasserbeständig, wasserdicht, speichelbeständig, hautverträglich, urinbeständig und chlorwasserbeständig. Es ist frei von verschiedenen schädlichen Stoffen und erfüllt die REACH-Norm. Für die Reinigung sollte kein scharfes Reinigungsmittel verwendet werden, sondern Seifenlauge oder ein spezieller Reiniger für Kunstleder. Bei der Verwendung von nicht farbechten Kleidungsstücken kann es zu Verfärbungen kommen
Es ist deshalb ideal für den Bezug von Polsterteilen mit intensiver Nutzung.

Eigenschaften: Formaldehydfrei, Reißfestigkeit > 300 N / 5 cm (EN ISO 1421), Weiterreißkraft: > 20 N / > 15 N (EN ISO 4674), **Scheuerfestigkeit: > 150.000 Scheuertouren** (EN ISO 12947-2), UV-Schutz, wasserdicht und schmutzabweisend behandelt

[ATN Master Plus Reinigungshinweise](#) | [ATN Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Technisches Datenblatt](#)

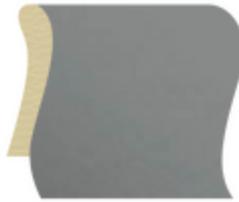 <p>Weiß (605)</p>	 <p>Porzellan (1280)</p>	 <p>Retro Grau (4635)</p>	 <p>Haselnuss (806)</p>	 <p>Zitrone (2795)</p>
 <p>Sonnenblume (614)</p>	 <p>Kürbis (4861)</p>	 <p>Rosenrot (1173)</p>	 <p>Samt (3105)</p>	 <p>Fuchsia (4103)</p>
 <p>Aprikose (4633)</p>	 <p>Lavendel (4634)</p>	 <p>Alpinblau (2395)</p>	 <p>Heidelbeerblau (2798)</p>	 <p>Marine (2799)</p>
 <p>Aquamarin (2389)</p>	 <p>Blaugrün (4035)</p>	 <p>Minze (2797)</p>	 <p>Smaragd (1274)</p>	 <p>Weidengrün (2394)</p>
 <p>Lindengrün (2794)</p>	 <p>Schokolade (2793)</p>	 <p>Mokka (3290)</p>	 <p>Silber (3120)</p>	 <p>Anthrazit (1049)</p>

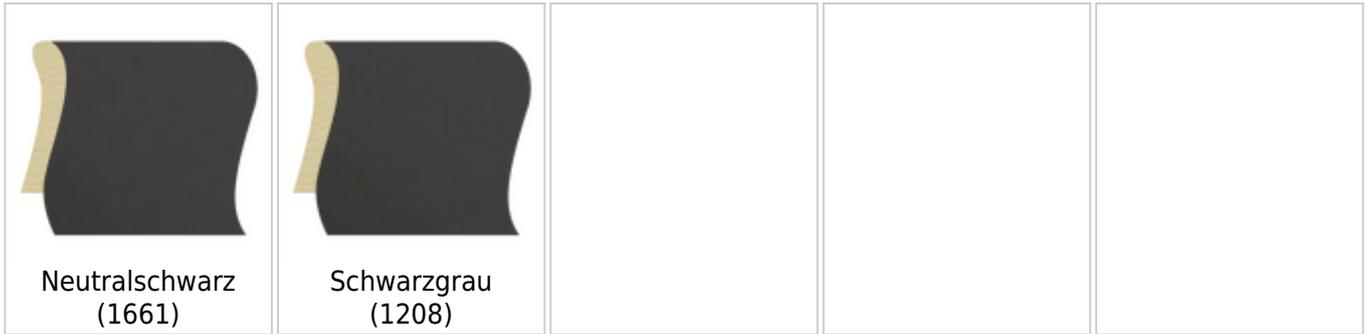

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.

Sie haben fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 225](tel:+49049619903225)

Email: service@medizina.de