



Schwerlast Behandlungsliege »Adeps PL3« | bis 350 kg

Elektrische Schwerlast Behandlungsliege »Adeps PL3« mit **dreiteiliger Liegefläche**. Länge 1950 mm, Breite 800 mm, Höhenverstellung mittels **leistungsstarkem Elektromotor**. Durch die elektromotorischer Verstellbarkeit der einzelnen Polstersegmente ist die Lagerung des adipösen Patienten mühelos möglich. **NEU!** Motor mit Niedervoltsteuerung und integrierter Sicherheitsfunktion

Preis: 4.743,50 €

Regulärer Preis: 5.200,36 € zzgl. MwSt.


Robuste Schwerlast Behandlungsliege »Adeps PL3«, elektrische Verstellbarkeit der einzelnen Polstersegmente

Die Schwerlast Therapieliege Adeps PL3 kennzeichnet sich durch die elektromotorische Verstellbarkeit der einzelnen Polstersegmente, wodurch die Lagerung des adipösen Patienten mühelos möglich ist. Der Spezial-Elektromotor (AC-Motor mit Hubkraft 12.000 N), das großvolumige Vierkantrohr mit 3 mm Wandstärke und die bewährte Scherenkonstruktion mit idealer Kraftverteilung sind die Kernpunkte dieser Schwerlast Behandlungsliege.

NEU! Motor mit Niedervoltsteuerung und integrierter Sicherheitsfunktion (Aktivierung des Systems erst nach Doppeltipp). Wir folgen der aktualisierten Empfehlung des BfArM.

Die dreiteilige Liegefläche von 1950 mm ist aufgeteilt in ein langes Kopfteil (500 mm), ein festes Rumpf-Mittelteil (410 mm) sowie ein Fußteil (1040 mm). Das **Kopfteil ist elektrisch stufenlos bis +45° und das Fußteil elektrisch stufenlos bis +30° positiv verstellbar**. Diese Schwerlast Therapieliege ist ein erstklassiges Produkt »Hergestellt in Deutschland« nach ISO 9001, Richtlinien (EU)2017/745 (MDR) und **belastbar bis 350 kg (mit 4-facher statischer Last von 1400 kg geprüft**.

Innovation mit hoher Schmutzresistenz und Reinigungsfreundlichkeit: Polster Unterseite mit thermoplastischer PVC Folie bezogen. Polsterbezüge jetzt aus Skai Toronto EN Kunstleder mit revolutionärer Technologie und sehr langer Lebensdauer. Diese können mit vielen Desinfektionsmitteln oder alkoholbasierten Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) desinfiziert werden. Mit geeigneten Reinigungsmitteln lassen sich viele Verschmutzungen rückstandslos entfernen.

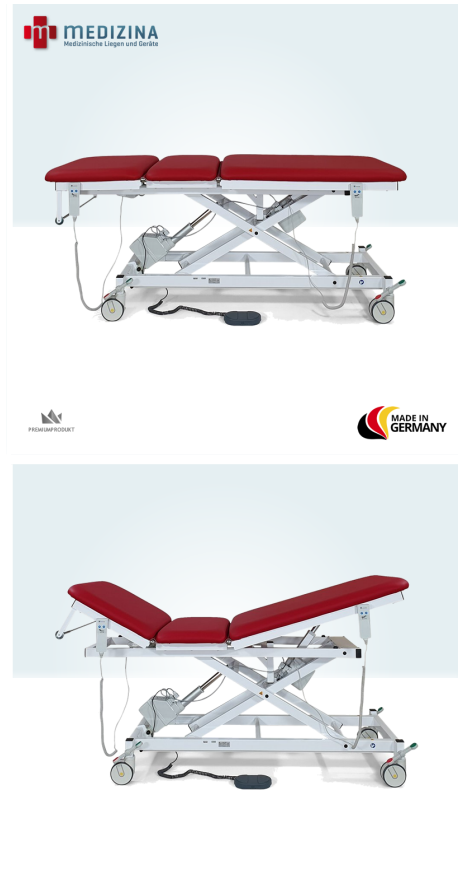

Das Produkt Schwerlast Behandlungsliege »Adeps PL3« | bis 350 kg

Produktinformation

- Sichere Ausführung gemäß Richtlinien (EU)2017/745 (MDR)
- Liegefläche 3-tlg.
- Leistungsstarker Elektromotor mit Hand- oder Fußschaltung lieferbar, stufenlose Höhenverstellung
- **Liegehöhe motorisch mit konstanter Hubgeschwindigkeit verstellbar, auch bei Belastung bis 350 kg**
- Verstelldauer von min. nach max. (auch bei Vollast): 36 sec. - Spezial-Elektromotor (AC-Motor mit Hubkraft 12.000 N)
- **Kopfteil stufenlos bis +45° motorisch verstellbar**
- **Fußteil stufenlos bis +30° motorisch verstellbar**
- Ein schwingungsfreier, äußerst robuster Gestellrahmen, großvolumiges Vierkantrrohr, 3 mm Wandstärke, bewährte Scherenkonstruktion mit idealer Kraftverteilung
- Kratz- und schlagfeste Spezial-Kunststoffbeschichtung in weiß oder auf Wunsch in vielen anderen Farbvarianten
- Hochwertige Polsterung, insgesamt 80 mm stark, Polsterbasis: Schichtholz
- Äußerst strapazierfähiger Kunstlederbezug in Ihrer Wunschfarbe
- Als Stoßschutz sind alle Kanten abgerundet und umpolstert
- **Belastbarkeit: 350 kg (nach IEC 60601 mit 4 facher statischer Last geprüft)**

Abmessung:

- Länge: 1950 mm
- Länge Kopfteil: 550 mm
- Mittelteil fest, Länge: 410 mm
- Länge Fußteil: 1.030 mm
- Breite: 800 mm
- Höhenverstellung: 590 bis 935 mm

Neigungsverstellung:

- Kopfteil motorisch bis +45°
- Fußteil motorisch bis +30°

Erweiterungen, Zubehör (Aufpreis)

Details und Preise nach der Produktbeschreibung bzw. Produktbildern

- Möglichkeit der Fahrbarkeit mit Schwerlastrollen

Technische Daten:

Abmessungen

- Höhe [cm]: 59, 94, Sondermaß möglich

- Polsterstärken [mm]: 80, 100

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Therapie & Reha, Pflege
- Belastbarkeit [kg]: 350, nach IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Adipositas, Schwerlast (≥ 225 kg), Zubehör (Gitter, Halter, etc.), Sonderanfertigung möglich
- Herstellerportrait: [K.H. Dewert](#)
- Hersteller: Dewert
- Modell: 7255
- Versandart: Spedition

Gestell

- Höhenverstellung: Elektrisch
- Gestellform: Scherengestell (Lotrecht)
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Liegefläche, Sitzteil bzw. Mittelteil, Bein-Fußteil (vereint)
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Steinschnitt
- Kopfteilverstellart: elektrisch
- Kopfteilverstellwinkel: 0° bis $+45^\circ$
- Rückenteilverstellart: keine
- Rückenteilverstellwinkel: 0° bis $+45^\circ$
- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: elektrisch
- Beinteilverstellwinkel: 0° bis $+30^\circ$
- Fußteilverstellart: elektrisch
- Fußteilverstellwinkel: 0° bis $+30^\circ$

Polsterbezüge und Polsterfarben:

NEU: skai® Toronto EN mit staynu Technologie

Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.

Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreiben, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichtecht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300

000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm



Weiß
(F6471002)



Perle
(F6471003)



Aschgrau
(F6471011)



Birke
(F6471004)



Cappuccino
(F6471005)



Kaschmir
(F6471006)



Kastanie
(F6471007)



Mokka
(F6471010)



Karob
(F6471009)



Nougat
(F6471025)



Rosé
(F6471026)



Sage
(F6471024)



Orange
(F6471022)



Sun
(F6471023)



Korn
(F6471013)



Lime
(F6471019)



Olive
(F6471014)



Fire
(F6471020)



Kirsche
(F6471008)



Stone Blue
(F6471001)



Deep Sea
(F64710 17 /18)



Schiefer
(F6471012)



Anthrazit
(F6471015)



Schwarz
(F64710169)

Kunstleder PANDORIA PLUS (Dezente Optik mit feiner Mikroporenstruktur)

Antibakteriell nach JIS Z 2801, antimikrobiell, besonders desinfektionsmittelbeständig, besonders schweiß-, urin- und blutbeständig, schwer entflammbar, besonders abriebfest, lichtecht, reiß- und weiterreißfest, langlebig, pflegeleicht und besonders öl- und fettbeständig. MPG DIN ISO 10993-5+10
Eigenschaften: Gewicht: 800 +/- 50g/qm, Dicke 1,35 +/- 0,2 mm, **Abrieb > 300.000**.

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)



skai® Mano-S Kunstleder

Hochwertig, widerstandsfähig und chic. Die elegante Kalbsledernarbung macht auch im medizinischen Bereich eine gute Figur. Die Oberfläche ist elektrisch leitfähig und ist für alle Bereiche bestens geeignet, in denen die elektrostatische Aufladung vermieden werden muss. Dieses spezielle Bezugsmaterial skai-Mano-S gibt es ausschließlich in schwarz.

Eigenschaften:

Material: ca. 90 % PVC-Compound, ca. 10 % BW/PES-Gestrick Gewicht: 650 +/- 50 g/m² Materialstärke: 1,1 +/- 0,2 mm, elektrisch leitfähig, langlebig, reißfest, lichtecht, vegan und desinfektionsmittelbeständig

Pflegehinweise:

Bitte unbedingt beachten! Mit wenig klarem Wasser oder einer PH-neutralen Seifenlösung und einer weichen Bürste oder einem Microfasertuch reinigen und anschließend mit einem weichen Tuch trocknen.

Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte bitte umgehend entfernen.

Ungeeignet sind unverdünnter Alkohol, unverdünntes Aceton, alle Lösungs- und Reinigungsmittel, Scheuermittel, Perchlorethylen, alle Arten von Wachs und Trichlorethylen. Diese Produkte können die Beschichtung der Bezüge beschädigen und rissig machen.



Schwarz Leitfähig
(F6461486)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de